

Gebruikershandleiding Adam Trippelstoel



m**s****p** 

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Voorgenomen gebruik	5
Veiligheidsinstructies	6
Vorbereidingen	7
Beschrijving geleverde onderdelen in de verpakking	8
Functiebeschrijving	10
In- en uitstappen van uw Adam Trippelstoel	13
Schoonmaak- en Desinfectie instructies.....	14
Stappenplan schoonmaken en desinfecteren	15
Fase 1 – Verwijderen visuele verontreiniging	15
Fase 2 – Gebruik van allesreiniger	15
Fase 3 – Gebruik van desinfectiemiddel	15
Fase 4 – Opruimen.....	15
Instructies hoe om te gaan met de accu's	16
Opladen van de Adam.....	17
Preventief onderhoudsschema (POS).....	18
Jaarlijkse inspectie	19
Te ontraden gebruik.....	20
Probleem oplossen	21
Technische specificaties	22
Afmetingen & Verstelbereik.....	23
Labels.....	24
Onderdelen & Accessoires	25
Opmerkingen/ aantekeningen:	26
Conformiteitsverklaring	27

Voorwoord

Geachte klant,

Bedankt dat u voor de Adam trippelstoel van MSP Medical Products heeft gekozen! Wij wensen vele jaren gebruikersgemak toe.

U zult merken dat de Adam veel opties biedt, om u gezond en comfortabel te laten zitten en bewegen.

Het is zeer aan te bevelen deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen om u zelf vertrouwd te maken met de mogelijkheden die deze stoel u biedt.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw verstrekker/dealer of rechtstreeks met ons en we staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Team MSP

Algemeen

MSP adviseert te allen tijde originele reserveonderdelen via msp-medical.com te bestellen, deze zijn speciaal voor uw Trippelstoel Adam ontworpen en geproduceerd. Hiermee vermindert u het risico op gevaren en verwondingen door het gebruiken van niet originele onderdelen.

MSP ontwikkelt en verbetert haar producten continu. Als gevolg daarvan behouden wij ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder verdere berichtgeving.

Indien de volgende termen in deze handleiding gebruikt worden is de betekenis als volgt:

-  **WAARSCHUWING:**
Indien de waarschuwing niet opgevolgd wordt kan dit resulteren in verwondingen aan uzelf en anderen.
-  **LET OP:**
Indien de instructies niet opgevolgd worden kan dit leiden tot beschadiging van de gehele stoel of onderdelen daarvan.
-  **OPMERKING:**
Deze opmerking is belangrijk voor het correct functioneren van de stoel.

Leest u deze handleiding aandachtig

Wij vragen u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen alvorens de Trippelstoel Adam in gebruik te nemen. De informatie in deze handleiding is essentieel voor een goede werking en correct onderhoud van uw stoel, evenals het voorkomen van mogelijke verwondingen door verkeerd gebruik.

Niet-originele aanpassingen kunnen de veiligheid van uw stoel aantasten.

Medical Spare Parts B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, incidenten of verminderde levensduur als gevolg hiervan.

Voorgenomen gebruik

Het gebruik van de trippelstoel Adam moet in lijn zijn met het voorgenomen gebruik en de veiligheidsinstructies. Als er onduidelijkheden zijn vragen wij u contact met ons of uw dealer/verstrekker op te nemen.

Deze voorziening is ontworpen om dienst te doen als trippel/werk stoel en is bedoeld als hulpmiddel in voornamelijk particuliere sfeer. Deze stoel heeft als doel het leven van de gebruiker eenvoudiger te maken dankzij de hoog/laag functionaliteit, lage rolweerstand van de wielen en ergonomisch design.

Beoordeling gebruiker

Deze voorziening is bedoeld voor gebruikers die voldoen aan de volgende aanbevelingen:

-  Het gewicht van de gebruiker is niet hoger dan 135 kg.
-  De lengte van de gebruiker is ten minste 120 cm.
-  De gebruiker heeft voldoende functionaliteit in de voeten/benen om zich zelfstandig te verplaatsen.

Levensduur voorziening

De levensduur van deze voorziening is tenminste tien (10) jaar, maar afhankelijk van de gebruiksintensiteit en laadintervallen, kan de levensduur van accupack en wielen korter zijn.

Deze levensduur is berekend met inachtneming dat het preventief onderhoud wordt uitgevoerd zoals beschreven in deze handleiding.

Afhankelijk van de slijtage kan het zo zijn dat sommige onderdelen zoals accu's en wielen alsmede sommige stoffeerdelen vervangen moeten worden tijdens de levensduur van deze voorziening.

Veiligheidsinstructies

Hieronder volgen een aantal essentiële instructies voor een veilig gebruik van uw voorziening.

WAARSCHUWING

Zorgt u er bij het in- en uitstappen van uw stoel voor, dat deze te allen tijde op de rem staat. Dit voorkomt eventuele verwondingen.

WAARSCHUWING

Wanneer u in de stoel zit en u wilt zich verplaatsen, zorgt u er dan voor dat de armleggers omhoog en gefixeerd zijn.

WAARSCHUWING

Zet de stoel nooit op de rem op een hellend vlak en leun achterover. U loopt anders het risico dat de stoel achterovervalt.

LET OP

Deze voorziening is voor binnenshuis gebruik. Wanneer u deze voorziening buitenshuis gebruikt bestaat de kans op permanente schade aan wielen en de elektrische componenten.

LET OP

Gebruik nooit scherpe objecten in de buurt van uw voorziening. Dit kan leiden tot schade.

LET OP

Verricht nooit werkzaamheden aan de trippelstoel Adam, als u daarvoor niet de benodigde kennis of bevoegdheid heeft.

Vorbereidingen

Neemt u onderstaande voorbereidingen in acht bij het gebruiken van uw voorziening.

Eerste gebruik

1. Doe een visuele inspectie om te kijken of er geen transportschade is aan uw Adam.
2. Voer de verpakking dient af volgens de geldende regelgeving.
3. Controleer of alle onderdelen geleverd zijn. U kunt dit vergelijken met de “Beschrijving onderdelen” lijst in deze gebruikershandleiding.
4. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding.
5. Pak de acculader uit en leg deze op een voor u makkelijk te onthouden plaats.
6. Laad uw Adam gedurende minimaal 8 uur op.
7. Test of alle functies werken zoals uitgelegd in het Preventief Onderhoudsschema (POS).
8. Bewaar deze gebruikershandleiding op een voor u makkelijk te onthouden plaats.

Voor elk gebruik

1. Controleer de wielen en de parkeerrem.

OPMERKING


Indien u vragen heeft of onzeker bent over het gebruik van de Adam, neemt u dan contact op met uw dealer/verstrekker of met ons.

Beschrijving geleverde onderdelen in de verpakking

De Adam verpakking bevat de volgende onderdelen:

-  Adam trippelstoel
-  Acculader
-  Mapje met documenten

In deze *exploded view* kunt u de onderdelen identificeren:

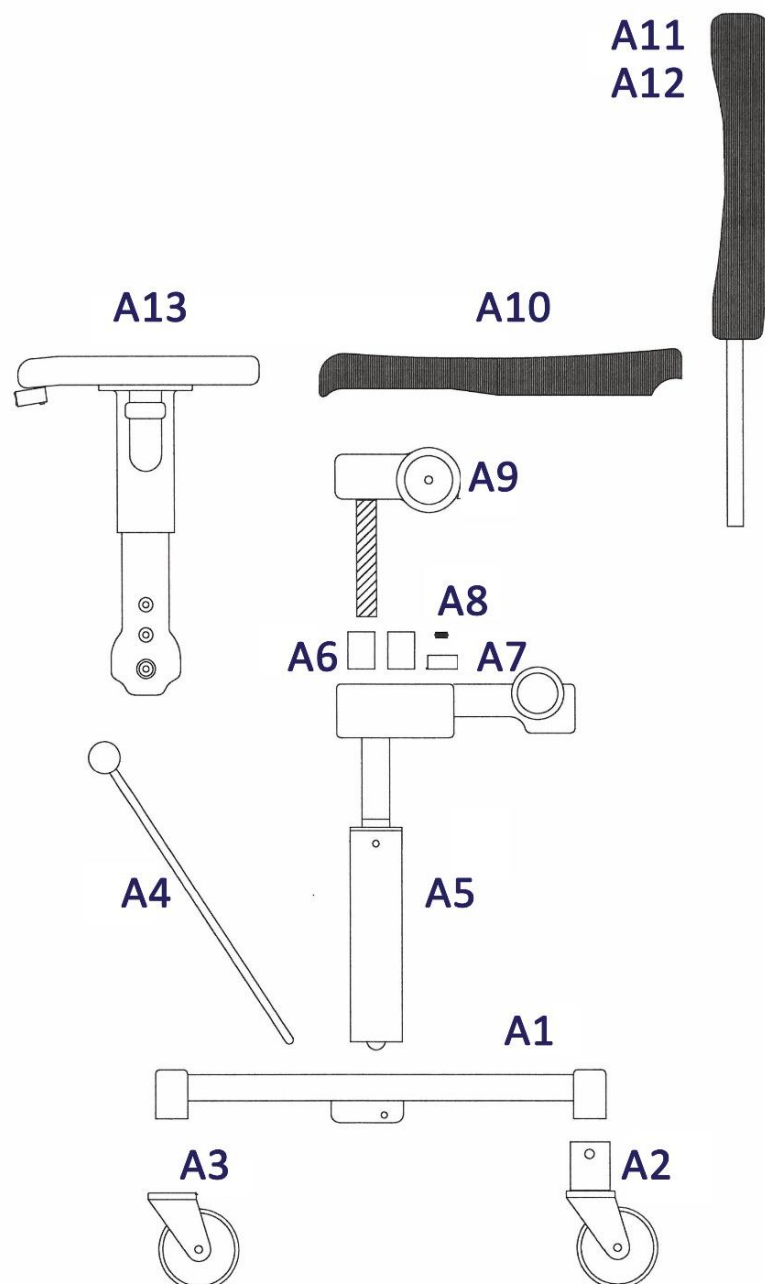

Beschrijving geleverde onderdelen in de verpakking

Item	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Opmerkingen
A1	MSP-MT-MP-00100	Hoofdframe	1	
A2	MSP-WH-MP-00100	Zwenkwiel ongeremd	2	Ø 100mm
A3	MSP-WH-MP-00110	Zwenkwiel geremd	2	Ø 100mm, centraal geremd
A4	MSP-MT-MP-00110	Remhendel	1	Inclusief kogelknop
A5	MSP-MT-MP-00150	Hefkolom	1	Complete samenstelling
A6	MSP-A-MP-00100	Accu	2	
A7	MSP-EK-MP-00100	Elektronica box	1	
A8	MSP-OV-MP-00100	Vermogensweerstand	1	Motor beveiliging
A9	MSP-MO-MP-00100	Hoog/laag aandrijving	1	Complete samenstelling
A10	MSP-PD-MP-0010X	Zitting	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A11	MSP-PD-MP-0011X	Rugleuning LAAG	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A12	MSP-PD-MP-0012X	Rugleuning HOOG	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A13	MSP-KIT-MP-00100	Armleuning	2	Complete samenstelling

Functiebeschrijving

Mechanische Hoog/Laag basis instelling:

Deze instelling is enkel voorzien om de Adam aan uw lichaamslengte aan te passen en dient door uw dealer/verstrekker bij het eerste gebruik ingesteld te worden.

1. Draai de Bout M10 (SW 17) los.
2. Verstel de kolom op de gewenste hoogte.
3. Let op dat de zitting recht op het onderstel blijft.
4. Draai de bout weer vast met aanhaalmoment Max. 90NM.



Elektrische Hoog/Laag verstelling:

De Adam is elektrisch in hoogte verstelbaar.

Dit doet u door de bediening die onder de armlegger zit te gebruiken.

Als u de knop in de richting van het pijltje omhoog drukt beweegt de stoel zich naar boven.

Als u de knop in de richting van het pijltje omlaag drukt beweegt de stoel zich naar beneden.

In overleg met uw dealer/verstrekker is deze bediening links of rechts te plaatsen.

Optioneel is de Adam ook met extra losse handbediening verkrijgbaar. (Zie afb.)



Bediening parkeerrem:

Op de stoel is een hendel aangebracht om de parkeer rem te bedienen.

Als de hendel naar voren staat is de stoel vrij te verrijden. Wanneer de hendel naar achteren staat, worden de achterwielen volledig geblokkeerd en kunt u veilig in- en uitstappen.

In overleg met uw dealer/verstrekker is deze hendel links of rechts te plaatsen.



Functiebeschrijving

Hoekverstelling rugleuning:

-  Druk de hendel onder aan de rugleuning naar beneden.
-  Breng de rugleuning in de juiste stand en zet de hendel weer naar boven.
-  De rugleuning wordt nu vergrendeld in de nieuwe stand.



Hoogteverstelling rugleuning:

-  Draai de ronde knop tegen de klok in los.
-  Schuif de rug op de gewenste hoogte.
-  Draai vervolgens de ronde knop met de klok mee vast.



Breedte verstelling armleggers:

-  Draai de inbusbouten aan de onderzijde van de zitting los om de armleggers in de breedte te verstellen.
-  Pas vervolgens naar de gewenste breedte aan.
-  Als de gewenste breedte is bereikt dient u de inbusbouten weer vast te draaien.



Hoogteverstelling armleggers:

-  Verstel de armleggers in hoogte door de handgreep aan de zijkant omhoog te trekken.
-  Stel daarna de armleggers op de gewenste hoogte in en laat de handgreep los.



Functiebeschrijving

Wegklappen armleggers:

-  Klap de armleggers weg om een eenvoudige zijdelingse transfer te maken.
-  Trek hiervoor de armlegger in zijn geheel omhoog en klap deze naar achteren weg



In- en uitstappen van uw Adam Trippelstoel

Zorgt u ervoor dat de parkeerrem te allen tijde geactiveerd is voordat u in- of uitstapt in uw trippelstoel zoals beschreven op pagina 12 van deze handleiding.

Als u vanuit het bed of een bank op de trippelstoel wilt plaatsnemen kunt u de armleuningen naar achteren wegklappen voor een zijdelingse transfer. Het wegklappen van de armleuningen staat beschreven op de vorige pagina.

Na het plaatsnemen kunt u de armleuning weer terugplaatsen. Deze valt automatisch terug in de vergrendelde positie.

Schoonmaak- en Desinfectie instructies

Gebruikt u voor het beste resultaat uitsluitend “MSP Medical Chemicals en MSP Medical disposables” producten.

Wij adviseren de volgende producten voor uw Adam trippelstoel:

-  MSP Medical Chemicals Allesreiniger (MC-AR-001)
-  MSP Medical Chemicals Desinfectiemiddel (MC-DI-001)



Wij adviseren de volgende schoonmaak accessoires voor uw Adam trippelstoel:

-  MSP Medical Disposables Handschoenen (MD-HA-LX-001)
-  MSP Medical Disposables Bril (MD-EY-CL-001)
-  MSP Medical Disposables Spray Bottle (MD-GN-BT-001)
-  MSP Medical Disposables Schoonmaakdoek (MD-GN-TW-001)
-  MSP Medical Disposables Handdoeken (MD-GN-TW-002)
-  MSP Medical Disposables Korte zachte borstel (MD-GN-BR-001)
-  MSP Medical Disposables Lange zachte borstel (MD-GN-BR-002)



Indien u vragen heeft over onderstaande procedure of indien u de producten / accessoires wenst te bestellen, neem dan contact op met onze klantenservice via +31 88 0531 000 of bezoek onze webshop: msp-medical.com

WAARSCHUWING

Om oog- en huidschade te voorkomen, draag te allen tijde handschoenen en een veiligheidsbril. Indien er contact wordt gemaakt ruim spoelen met water. Mocht er irritatie ontstaan aan de huid of ogen, neem dan contact op met een dokter.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing en Material Safety Data Sheet (MSDS) van het desinfectiemiddel.

WAARSCHUWING

Om contaminatie te voorkomen, volg te allen tijde de stappen in deze gebruikshandleiding.

LET OP

Om schade aan uw Adam trippelstoel te voorkomen, gebruik uitsluitend MSP Medical Chemicals producten.

Stappenplan schoonmaken en desinfecteren

Uw Adam Trippelstoel is eenvoudig te onderhouden middels dit stappenplan. Wanneer u deze procedure nauwgezet volgt zal de stoel altijd in optimale hygiënische staat verkeren.

Fase 1 – Verwijderen visuele verontreiniging

-  Trek handschoenen aan alvorens te beginnen.
-  Maak de Adam vrij van stof en vuilresten door een sprayflacon met water te vullen en de bekleding en frame in te sprayen. Neem vervolgens een zachte borstel en verwijder de vuilresten. Maak droog met een schoonmaakdoek.
-  Controleer of er vuilresten rondom de wielen zitten (zoals haren of opgehoopt stof) en verwijder deze met de hand.

Fase 2 – Gebruik van allesreiniger

-  Zet nu ook de veiligheidsbril op.
-  Neem de MSP Medical Chemicals allesreiniger in sprayflacon en spray de stoel helemaal in, met uitzondering van de bekleding.
-  Gebruik de (lange) zachte borstel en borstel de gehele stoel grondig. Eventueel kan ook een schoonmaakdoek gebruikt worden.
-  Neem een nieuwe schoonmaakdoek en maak deze vochtig met water. Verwijder de schoonmaakresten. Optioneel kan een sprayflacon met water en droge doek gebruikt worden om de resten te verwijderen.
-  Herhaal bovenstaande stap totdat de stoel vrij is van schoonmaakresten. De doek moet geregeld gespoeld worden in water.

Fase 3 – Gebruik van desinfectiemiddel

-  Neem de MSP Medical Chemicals desinfectiemiddel in sprayflacon en spray de stoel helemaal in, met uitzondering van de bekleding.
-  Gebruik de (lange) zachte borstel en borstel de gehele stoel grondig. Eventueel kan ook een schoonmaakdoek gebruikt worden.
-  Neem een nieuwe schoonmaakdoek en maak deze vochtig met water. Verwijder de desinfectieresten. Optioneel kan een sprayflacon met water en droge doek gebruikt worden om de resten te verwijderen.
-  Herhaal bovenstaande stap totdat de stoel vrij is van desinfectieresten. De doek moet geregeld gespoeld worden in water.
-  Laat nu de gehele stoel drogen.

Fase 4 – Opruimen

-  Uw Adam trippelstoel is weer klaar voor gebruik. Alle gebruikte materialen dienen te worden afgevoerd/hergebruikt volgens de geldende recyclenormen.

Instructies hoe om te gaan met de accu's

WAARSCHUWING

Om verwondingen te vermijden moet u te allen tijde de accu NIET:

-  Verbrijzelen
-  Lek prikken
-  Openen
-  Ontmantelen

Indien de behuizing van de accu opengaat en de inhoud in contact komt met uw huid en/of kleren, spoel dan onmiddellijk royaal met water.

Indien de inhoud van het accupakket in aanraking komt met uw ogen, spoel onmiddellijk royaal met water en zoek medische hulp.

Inhalering van de inhoud kan leiden tot irritatie van de luchtwegen. Zoek frisse lucht en medische hulp.

OPMERKING

Ter preventie van oververhitting en explosiegevaar, stel het accupakket NIET bloot aan vuur of buitenproportionele warmtebronnen.

Opslag

Indien u uw Adam Trippelstoel voor langere periode niet gebruikt, neemt u dan onderstaande mee in acht:

-  De accu's zullen zichzelf langzaam ontladen indien deze niet gebruikt wordt. Wij adviseren om minimaal elke 6 maanden de accu's op te laden met de meegeleverde oplader om de levensduur te verlengen.
-  Als de Adam trippelstoel niet in gebruik is dan moet de omgevingstemperatuur liggen tussen 0°C en +30°C.
-  Voor maximale prestaties, stel niet accu's niet bloot aan temperaturen hoger dan +50°C.

Opladen van de Adam

Controleer voor gebruik de acculader op beschadigingen.

Laad uw Adam alleen op met de meegeleverde acculader (MSP-C-MP-00100). Het gebruik van een niet-originele lader kan lijden tot een verkorte levensduur van uw accu's en/of beschadigingen aan de elektronica.

De meegeleverde acculader regelt zichzelf volledig automatisch en zorgt altijd voor de meest ideale laadcycli. Het correcte stappenplan voor het opladen van uw stoel leest u hieronder:

-  Verbind de lader eerst met het lichtnet door deze in het stopcontact te steken.
-  Plug daarna het laadsnoer in de laadaansluiting onder de armlegger (fig. 1). De indicatie LED zal nu rood kleuren.
-  Wanneer het laden voltooid is, zal de indicatie LED op de acculader groen kleuren. U kunt nu het laadsnoer verwijderen uit de laadaansluiting en de acculader loskoppelen van het lichtnet. Bergt u de acculader weer op, op een voor u makkelijk te onthouden plaats.

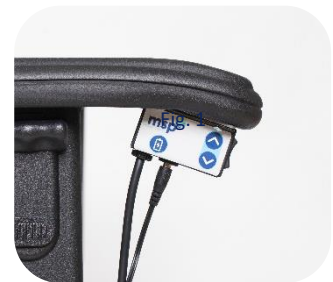


Fig. 1

De Adam kan met een vol accupakket circa 25 maal volledig omhoog en omlaag met een gemiddeld gebruikersgewicht. Mochten de accu's te leeg raken dan schakelt de elektronica automatisch af en dient u de stoel op te laden volgens bovenstaande procedure.

De accu's zijn op basis van SLA-technologie en daarmee gas- en vloeistofdicht. Hierdoor kan op elke locatie geladen worden en zijn er geen speciale voorschriften vereist.

In de praktijk is het zinvol om bij dagelijks gebruik de stoel elke avond op te laden.

Indien u de stoel langere tijd buiten gebruik stelt, dient u de schakelaar aan de achterzijde op 0 te zetten of de lader aangesloten te laten. De lader zal dan dienstdoen als druppellader en houdt de accu's in goede conditie. Dit voorkomt schade aan het accupakket.

Voor een maximale levensduur raden wij u aan het accupakket met regelmatige intervallen op te laden. Bijvoorbeeld iedere avond of iedere twee dagen, naar gelang de intensiteit waarmee u de voorziening gebruikt.

Einde levensduur

Als u merkt dat de Adam steeds korter gebruikt kan worden, dan zijn de accu's aan vervanging toe. Neemt u contact op met uw dealer/verstrekker of met ons voor een nieuw accupakket.

De oude accu's dienen volgens de geldende regelgeving afgevoerd te worden of kunnen naar ons geretourneerd worden.

Preventief onderhoudsschema (POS)

Uw Adam trippelstoel ontkomt helaas niet aan slijtage. Als u onderstaande punten binnen de aangeduide intervallen uitvoert, kunt u deze slijtage tot een minimum beperken en de levensduur optimaal benutten.

Actiepunt	Voor elk gebruik	Elke maand	Elke 6 maanden	Elke 12 maanden
Controle remwerking				
Controle wielen				
Controle hoog/laag functie				
Controle lader en accu				
Controle frame				
Controle bekleding				
Reiniging frame en wielen				

WAARSCHUWING

Om verwondingen te komen, maak nooit modificaties aan uw voorziening en gebruik geen niet-compatibele onderdelen.

WAARSCHUWING

Verricht nooit werkzaamheden aan de Adam trippelstoel wanneer u niet over de vereiste kennis en bevoegdheden beschikt.

Jaarlijkse inspectie

Buiten het preventieve onderhoud is voor een goede en veilige werking van de Adam trippelstoel een jaarlijkse inspectie noodzakelijk.

Deze dient uitgevoerd te worden door de technische dienst van MSP of uw dealer/verstrekker.

Deze inspectie dient minimaal de volgende controles te omvatten:

Op mechanisch vlak:

-  Controle van het frame en hefmechanisme op (haar)scheur indicaties.
-  Controle van alle las- en boutverbindingen.
-  Controle op rechtheid.
-  Controle op andere schade door slijtage of impact van buiten.
-  Controle van de aandrijving en wielen.
-  Controle van alle spelingen en afstellingen.
-  Controle van de hoog/laag spindel en spindelmoer.

Op elektrisch vlak:

-  Controle van de bedrading op kabelbreuken.
-  Controle van alle stekkerverbindingen.
-  Controle van de elektrische (veiligheids-)functies.
-  Controle van de software van de besturing.
-  Controle van de accu's op capaciteit.
-  Controle van de acculader.

Tot slot dient een aardings- / isolatie-test aan het accupakket en de acculader te worden uitgevoerd!

Te ontraden gebruik

-  Gebruik de Adam trippelstoel niet voor transport van dieren of goederen.
-  Gebruik de Adam trippelstoel niet als trek/hijs - of duw-hulpmiddel, voor welke toepassing dan ook.
-  Gebruik de Adam trippelstoel niet als er een defect is of een vermoeden van een defect.
-  De Adam trippelstoel is voorzien van een erg krachtig hefsysteem, laat kinderen daarom niet spelen met de trippelstoel.

Probleem oplossen

Hieronder vindt u problemen die mogelijk voor kunnen komen en de bijbehorende oplossing daarvoor.

Omschrijving probleem	Oorzaak	Oplossing
Adam rijdt zwaar/stroef	De parkeerrem is actief	De parkeer rem deactiveren
Adam reageert niet op bediening	Beveiliging actief	Bediening loslaten 2 sec. wachten en opnieuw proberen.
Adam reageert niet op bediening	Accu is leeg	Accu opladen.
Adam gaat alleen omlaag	Accu is bijna leeg	Accu opladen.

Technische specificaties

Algemeen

Maximaal totaalgewicht	177 Kg
Maximaal patiënt gewicht	135 Kg
Gewicht van Adam	42 Kg
Model en Type	Adam Trippelstoel MP-AD-SD-00XXX
IP klasse	IP 40
Accu artikelnummer	2x MSP-A-MP-0100
Accu technologie	Gesloten lood zuur technologie
Accucapaciteit	1200MA/h
Accuspanning	12 V/DC
Acculader artikelnummer	MSP-C-MP-00100
Maximale inschakelduur	10 % 2 min. AAN / 18 min. UIT
Maximale geluidsdruk	60 dB Max.

Gebruik, Transport & Opslag

Temperatuur	+10°C tot +40°C in gebruik -20°C tot +70°C tijdens transport -20°C tot +70°C bij opslag
Luchtvochtigheid	15-95% bij +20°C in gebruik 10-80% bij +20°C tijdens transport 10-80% bij +20°C bij opslag
Luchtdruk	800hPa tot 1060hPa in gebruik 500hPa tot 1100hPa tijdens transport 500hPa tot 1100hPa bij opslag

Recycling

Deze trippelstoel dient te worden gerecycled volgens nationale regelgeving.

Accu	Sealed Lead Acid Valve Regulated (SLA/VRLA) Niet weggooien, enkel recyclen
Verpakking	Karton, recyclebaar
Adam trippelstoel	Elektrische, metalen en plastic onderdelen moeten worden gescheiden en gerecycled worden volgens nationale regelgeving

Afmetingen & Verstelbereik

Zithoogte	Minimaal 42 cm Maximaal 74 cm
Elektrische hoogteverstelling	200 mm
Mechanische hoogteverstelling	120 mm
Zitdiepte	46 cm
Zitbreedte	46 cm
Rughoogte	40 cm lage rug 50 cm hoge rug
Rughoekverstelling	75-120°
Wieldiameter	100 mm optioneel 125/150 mm
Hoogteverstelling armleggers	17-25 cm, gemeten vanaf de zitting. Weg klappen mogelijk voor zijdelingse transfer
Lengteverstelling armleggers	n.v.t.
Breedte tussen de armleggers	38-65 cm
Maximaal gebruikersgewicht	135 kg



Adam in laagste en
hoogste stand

Labels

Type nr. label

Gebruik het serienummer als u contact opneemt met onze technische dienst of bij het bestellen van onderdelen.



Labels bedieningen:

Label handbediening en laad aansluiting.



Onderdelen & Accessoires

Item	Artikelnummer	Omschrijving	Vanaf s/n	Tot s/n	Aantal	Opmerkingen
A1	MSP-MT-MP-00100	Hoofdframe	Alle	Alle	1	
A2	MSP-WH-MP-00100	Zwenkwiel		24602	2	Ø 100mm
	MSP-WH-MP-00141	Dubbel zwenkwiel	24603			
A3	MSP-WH-MP-00110	Wiel geremd		24602	2	Ø 100mm, centraal geremd
	MSP-WH-MP-00151	Dubbel wiel geremd	24603			
A4	MSP-MT-MP-00110	Remhandle	Alle	Alle	1	Inclusief kogelknop
A5	MSP-MT-MP-00150	Hefkolom	Alle	Alle	1	Complete samenstelling
A6	MSP-A-MP-00100	Accu	Alle	Alle	2	
A7	MSP-EK-MP-00100	Elektronica box	Alle	Alle	1	
A8	MSP-OV-MP-00100	Vermogensweerstand	Alle	Alle	1	Motor beveiliging
A9	MSP-MO-MP-00100	Hoog/laag aandrijving	Alle	Alle	1	Complete samenstelling
A10	MSP-PD-MP-0010X	Zitting	Alle	Alle	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A11	MSP-PD-MP-0011X	Rugleuning LAAG	Alle	Alle	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A12	MSP-PD-MP-0012X	Rugleuning HOOG	Alle	Alle	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A13	MSP-PD-MP-00130	Armleuning	Alle	Alle	2	Complete samenstelling

-  Item: verwijst naar het nummer in de *exploded views*.
-  Artikelnummer: Gebruik dit nummer als referentie bij het bestellen.
-  Omschrijving: Een korte uitleg over het artikel.
-  Vanaf s/n | tot s/n: Geeft het eerste en laatste serienummer van de voorziening weer waarvoor dit artikel geschikt is.
-  Aantal: Geeft aan hoe vaak het artikel in de voorziening gebruikt wordt.
-  Opmerkingen: Eventuele opmerkingen over het artikel.

[illegible]

Conformiteitsverklaring

EG-Verklaring van overeenstemming

(volgens richtlijn medische hulp middelen MDR EU 2017/745)

Wij, MSP-Medical Products B.V.
De Sonman 7
5066 GJ Moergestel
The Netherlands

Verklaren dat: Elektrisch verstelbare Trippel/werk stoel
Merknaam Adam


Type: Adam / Adam Flex / Adam Go / Adam +

Met serienummers MPADSD***** (* heeft een waarde tussen 0-9)

- In overeenstemming is met de Richtlijn MDR EU 2017/745 (richtlijn medische hulpmiddelen) en is geclassificeerd als klasse 1
- De Adam is op veiligheid getest volgens
 -  EN 10535
 -  EN 12182
 -  EN 60601-1
 -  Bio compatibility ISO 10993
- De Adam is EMC getest en voldoet aan alle eisen conform
 - o Emissie EN 60601-1-2 (2007) + AC (2010)
 - o Emissie EN 61000-3-2 (2006) + A1 (2009) + A2 (2009)
 - o Emissie EN 61000-3-3 (2008)
 - o Immunititeit EN 60601-1-2 (2007) + AC (2010)
- De interne stroombron/ accu is op veiligheid getest volgens IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-22.2 No 60601-1, IEC62133, UL2054.

MSP-Medical Products b.v. is niet bekend met enige elektromagnetische invloeden tussen de Adam en andere elektrische producten.

Technisch dossier samengesteld door L.J.M.G. Dhanpat te Moergestel, 11-10-2023.

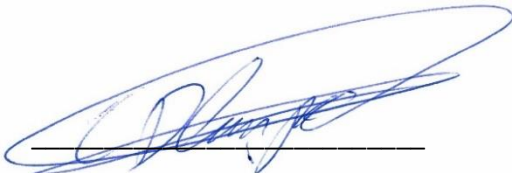

L.J.M.G. Dhanpat
Medical Spare Parts B.V.

